

Návod k použití Elektrického sonického kartáčku



Kartáček se může uvést do chodu teprve po přečtení manuálu

1. Úvod
2. Popis výrobku
3. Režimy péče o zuby
4. Technická specifikace výrobku
5. Způsob použití
 - a) Způsob použití sonického kartáčku
 - b) Způsob nabíjení přístroje
6. Čištění a způsob údržby
7. Připomínky týkající se bezpečnosti
8. Oprava přístroje
9. Skladování a doprava
10. Recyklace a utilizace
11. Vysvětlení symbolů
12. Záruční podmínky

1. Úvod

Děkujeme za důvěru při volbě našeho sonického kartáčku.

Výrobku je určený výhradně pro individuální domácí použití. Není určený pro průmyslové, obchodní používání nebo i ve zdravotních střediskách.

Doporučuje se pečlivé přečtení celého návodu před použitím přístroje a jeho definitivní dodržování.

2. Popis přístroje



Péče o zdraví ústní dutiny je snadnější s elektronickým sonickým kartáčkem. Díky patentované sonické technologii bělení a zvláštní hlavici kartáčku, který jemně odstraňuje zubní kámen zuby jsou jasně čistší a zdravější. Upéct režimy provozu přístroje umožní přizpůsobení kartáčku individuálním potřebám uživatele. Inteligentní systém časování zajistí optimální dobu čištění zubů.

3. Režimy péče o zuby

- **Čištění - Clean**
Časovač zajistí čištění po dobu dvou minut, aby úsměv byl výjimečný.
- **Bělení - White**
Režim bělení zubů odstraňuje přebarvení z povrchu zubů
- **Ochrana dásní – Gum care**
Mytí zubů bude příjemné v případě použití režimu Gum Care, který dvě minuty intenzívně čistí zuby a další minutu jemně masíruje dásně
- **Jemný- Sensitive**
Jemné pohyby kartáčku zajistí jemnou péči citlivým zubům a dásním
- **Pro Děti - Kids**
Tento režim je speciálně navržen pro čištění zubů u dětí. Díky jemným pohybům nedráždí dásně

4. Technická specifikace výrobku

Název výrobku:	Sonický kartáček
Doba nabíjení:	Asi 16 hodin
Frekvence vibrací:	Přibližně 37000 čisticích pohybů
Napětí:	AC 100-240 V, 50 Hz
Doba provozu:	Za předpokladu použití 2 dvakrát denně po dobu 2 minut (po úplném nabití) asi 3 týdny
Režim nabíjení:	Bezdrátový
Funkce:	Clean/ White / Gum care/ Sensitive/ Kids
Třída vodotěsnosti:	IPX7

5. Způsob používání

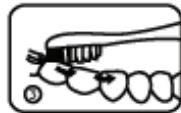
Před prvním použitím se seznámte s celým návodem a ujistěte se, že souprava je kompletní a nepoškozená a nemá žádné poškození. V případě poruchy přístroj nepoužívejte.

Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda nemá nahodilé mechanické poškození, praskliny krytu nebo jiná poškození. V případě výskytu nepravidelnosti přístroj nepoužívejte.

Důležité:

- Před každým použitím kartáčku vyndejte zástrčku sonického kartáčku ze zásuvky
- Kontrolka nabití bliká na kartáčku žlutě, když se baterie vybíjí.
- Kontrolka nabití svítí na kartáčku, když je baterie nabitá.

a) způsob použití sonického kartáčku:

	Nasad'te opatrně hlavici na držadlo kartáčku. Mezi hlavici a tělem kartáčku musí zůstat malý prostor aby přístroj správně.
	Ponořte hlavici kartáčku do vody. Před uvedením do chodu vymáčkněte na hlavici malé množství zubní pasty před uvedením do chodu.
	Pak vložte kartáčku do úst, spust'te ji a začněte čistit zuby
	Podržte hlavici k dásním pod uhlím 45° a pomalu pohybujte kartáčkem.
	Držte jemně kartáček a pohybujte pomalu krouživým pohybem. Příliš netlačte.
	Po každém použití: • Odpojte přístroj • Odstraňte hlavici z těla kartáčku • Opláchněte hlavici kartáčku pod tekoucí vodou

b) způsob nabíjení přístroje:

- 1) Pečlivě osušte kelímek a kartáček měkkým hadříkem.
- 2) Přesvědčte se, že nabíječka je odpojená od zásuvky.
- 3) Postavte skleněnou kelímek na nabíječku.
- 4) Pomoci USB kabelu spojte kelímek s adapterem.
- 5) Adapter připojte do zásuvky.
- 6) Vložte kartáček do kelímku.
- 7) Když se kontrolka baterie rozsvítí, kartáč bude zcela nabitý. Až do té doby neodstraňujte kartáč z mládě. Tím se prodlouží životnost baterie. (Aby nedošlo k rychlé spotřebě baterie, po úplném nabití lithiové baterie odpojte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky nebo vyjměte kartáč z nabíječky/kelímku).

6. Čistění a údržba

	Čistění a údržba výrobku: Po každém použití: Vypnete přístroj Odstraňte hlavici z těla kartáčku Opláchněte hlavici kartáčku pod tekoucí vodou, zabráníte tak rozmnožování bakterií. Nepoužívejte během mytí a dezinfekce kyseliny ani zásadité čisticí prostředky
	Sušení: Počkejte, až uschne, nebo osušte měkkým ručníkem.
	Čistění kelímku: Před čišťením vyndejte zástrčku ze zásuvky. Osušte výrobek měkkým ručníkem. Měkkým ručníkem osušte i zástrčku (adapter).
	Výměna hlavic: Zubaři doporučují výměnu hlavice kartáčku každé 2 měsíce.

7. Bezpečnostní doporučení

- Kartáčky používejte v souladu s tímto návodem.
- Po celou dobu používání výrobku uschovejte návod a balení.
- Během prvního použití kartáčku může se vyskytnout pocit bodání do dásní, je to přechodný jev, který asi po týdnu zmizí.
- Pokud kartáček nepoužíváte po delší dobu, může přestat fungovat. V tomto případě vložte kartáček do kelímku s nabíjecím podstavcem na nejméně 10 minut a opětovně uveďte kartáček do chodu.
- Kartáček by měl být používán pouze s náhradními díly doporučenými výrobcem.
- Před prvním použitím se poraďte se svým stomatologem.
- Ten výrobek je určen výlučně pro individuální použití.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Čistěte pravidelně zástrčku (bez použití vody), za účelem zabránění shromažďování prachu a špíny a také zmenšení izolačního efektu. Zabraní to přehřívání přístroje a elektrickému šoku a také jinému zbytečnému poškození.
- Nedotýkejte se přístroj mokřýma rukama.
- Po zapojení nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Chraňte přístroj před proniknutím vody a jiných kapalin.
- Používejte zařízení pouze k účelům určeným výrobcem.
- Výrobek není určen pro zvířata.
- Během čistění nepoužívejte žravé látky a rozpouštědla.

8. Oprava přístroje

Do zařízení nezasahujte samostatně. Při poruše kontaktujte odborníka.

9. Skladování a doprava

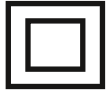
- Během dopravy chraňte přístroj před otřesy.
- Přístroj přechovávejte v místech nepřístupným dětem.
- Přechovávejte přístroj v suché a ventilované místnosti.
- Přístroj přechovávejte při teplotě od -7 °C až 40 °C.

10. Recyklace a využití

 **Symbol škrtnutého odpadkového koše** znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat do obvyklých kontejnerů. Segregace odpadů určených pro recyklaci pomáhá chránit naše životní prostředí.

Povinnosti uživatele je odevzdat odpadní zařízení a na určené místo za účelem recyklace odpadů vzniklých z elektrických a elektronických zařízení.

11. Vysvětlení symbolů

	Seznamte se s návodem	LI_ION	Zařízení obsahuje lithium-iontový akumulátor
	POZOR!		Střídavý proud
RoHS	Nový elektronický přístroj uváděný na trh obsahuje omezení ohledně obsahu některých nebezpečných látek		Ochrana před elektrickým úrazem – přístroj II. třídy
	Kód výrobní šarže	IP	Stupeň krytí proti pevným látkám (pronikání vody)
	Datum výroby		Nevyhazujte spolu s jinými odpady
	Tato tovární značka znamená, že výrobce zaplatil za recyklaci		Balení určené k recyklaci
	Výrobek přizpůsobený ke kontaktu s potravinami		Materiál pro recyklaci
	Chraňte proti vlhku		Chraňte před působením slunečního záření

12. Záruční podmínky

Záruční doba trvá 24 měsíce od datum prodeje uvedeného na stvrzence nebo faktuře za zboží.

Během těch 24 měsíců prodávající se zavazuje vyměnit vadný produkt na nový nebo odevzdat peníze v případě podání odůvodněné reklamace.

Ručitel se zavazuje převzít od zákazníka vadný výrobek na své náklady, k posouzení a vyjádření k obdrženému reklamačnímu prohlášení během 14 kalendářních dnů od datum obdržení tohoto přístroje.

1. Záruka se vztahuje na přístroj, kterým je sonický kartáček.

- Tato záruka se nevztahuje na exploatační díly opotřebované během standardního používání přístroje, tzn.: vyměnitelné hlavice.

2. Reklamující osoba je povinná podat reklamaci s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o zakoupení (pokladní účtenka nebo faktura).

3. Reklamované zboží by mělo být dodáno v čistém stavu a v originálním balení s veškerými díly, a také výše uvedenými doklady.

4. Záruka se vztahuje na vady nebo poškození přístroj nezpůsobené vinou uživatele.

Záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená uživatelem, včetně mechanických, chemických nebo termických poškození;
- poškození která vznikla špatným používáním způsobeným neseznámením se s manuálem (včetně instalace,
- používání a čištění přístroj);
- poškození vzniklých vlivem používání nevhodných exploatačních dílů;
- poškození vzniklých vlivem úprav, změn a oprav provedených uživatelem.
- poškození vzniklých vlivem vadného nabíjení přístroj.

5. V případě, když verze výrobků zcela neodpovídá návodu, práva zákazníka (spotřebitele) nejsou omezena.

6. Záruční list, pokud není vyplněn správně, nebo není na něm razítko obchodu a připojené účtenky, je neplatný.

Název zboží	
Číslo série přístroj (LOT)	
Datum a místo prodeje	
Podpis a razítko prodejce	
Čitelný podpis kupujícího *	

**Čitelný podpis kupujícího je současně potvrzením seznámení s podmínkami záruky a instrukci obsluhy přístroj.*

Reklamací výrobku v záručním období je třeba nahlásit firmě:

HELBO SP Z O.O. na adresu kanceláře:

Ul. Łódzka 80, 95-054 Ksawerów

Nebo telefonicky +48 728 955 471

Autorizovaný servis, který provádí opravy v záručním a v pozáručním období:

Milan Řihák

Sibiřská 89, 621 00 Brno.

Tel.00420731155864

e-mail milanrihak@seznam.cz

Servisní služba je otevřena od pondělka po pátek v hodinách 8.00 – 17.00.

Dovozce/Distributor:

HELBO Sp.z o.o.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14A

30-797 Krakow

www.helbo.pl

Datum aktualizace letáku: Smět 2020

Vyrobeno v Číně.

